

S·Max M

coMfortable Performance Series

УГЛОВЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ





Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ: **M95L** КОД ЗАКАЗА: **C1023**

Без оптики МОДЕЛЬ: **M95** КОД ЗАКАЗА: **C1026**

Повышение 1:5

- Четырехточечный спрей • Для FG боров (Ø 1,6)
- Максимальная скорость: 200 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ: **M25L** КОД ЗАКАЗА: **C1024**

Без оптики МОДЕЛЬ: **M25** КОД ЗАКАЗА: **C1027**

Прямая передача 1:1

- Одинарный спрей • Для СА боров (Ø 2,35)
- Максимальная скорость: 40 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ: **M15L** КОД ЗАКАЗА: **C1025**

Без оптики МОДЕЛЬ: **M15** КОД ЗАКАЗА: **C1028**

Понижение 4:1

- Одинарный спрей • Для СА боров (Ø 2,35)
- Максимальная скорость: 10 000 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ: **M65** КОД ЗАКАЗА: **H1008**

Прямая передача 1:1

- Одинарный спрей • Для НР боров (Ø 2,35)
- Для СА боров (Ø 2,35)*

*Необходимо использовать с ограничителем бора

- Максимальная скорость: 40 000 об/мин



Промывается в аппарате для термодезинфекции.




135°C Автоклавирование при температуре до 135 °С.

S-Max M

coMfortable Performance Series

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Керамические подшипники

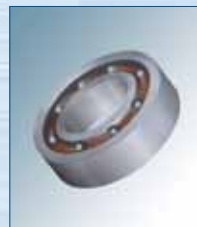

Керамические подшипники на 25% прочнее традиционных подшипников из нержавеющей стали и имеют в два раза меньший вес. Керамические подшипники обеспечивают меньшее трение шариков и тем самым значительно повышают эффективность работы и продлевают срок службы роторной группы (M95L / M95).



Четырехточечный спрей и оптика из сотового стекла



Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю область обработки, в то время как световод из сотового стекла точно освещает необходимый участок (четырёхточечный спрей: M95L / M95).

Система очистки головки



Запатентованная система очистки головки от NSK представляет собой механизм, предотвращающий попадание жидкости и микрочастиц в роторную группу наконечника, что значительно продлевает срок службы подшипников.

Бесшумная работа без вибраций

Для создания роторной конструкции были использованы высокоточные ноу-хау технологии, благодаря которым уровень шума значительно снижен, а вибрации сведены к минимальному уровню, что обеспечивает комфорт как для пациента, так и для врача.



Эргономичный дизайн и корпус из нержавеющей стали

Эргономичный дизайн наконечника наряду с идеально сбалансированным приятным на ощупь корпусом обеспечивают отличный доступ к обрабатываемой области.

ПРЕВОСХОДНАЯ РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ


Угловые наконечники S-Max серии M обладают мощной режущей способностью. Это надежные инструменты с прекрасной балансировкой и эргономичным дизайном, обеспечивающие простой доступ к нужному участку и отличный захват. Наконечники S-Max серии M от NSK созданы для работы без компромиссов. Убедитесь в этом сами.



NSK www.nsk-russia.ru



NSK

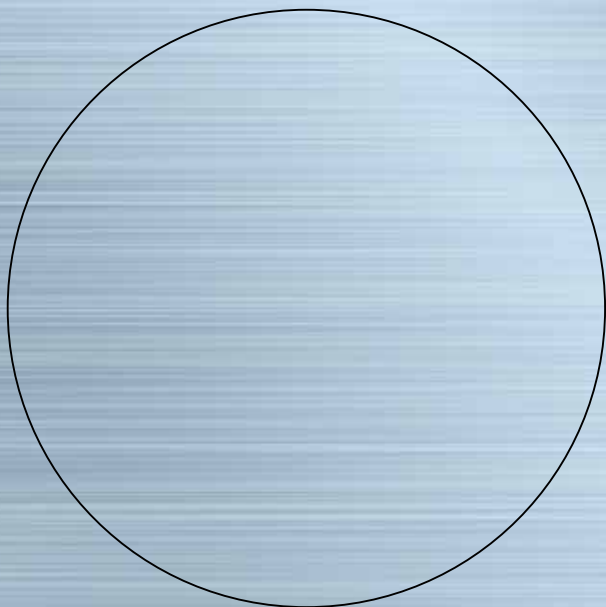

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

S-Max серии M